

EnDrive Zero™
Powered Stapler
mit 4x2
Klammernaht-
technik




EnDrive Zero™

Powered Stapler mit 4x2 Klammernahttechnik.

- Smart Power Indikator
- Echte Einhandbedienung
- 4x2 Klammernahttechnik
- Einzigartig abgestufte Klammerformation
- 60° Abwinkelung für verbesserten Zugang

4x2 Klammernahttechnik

4 Klammerreihen im Restgewebe und 2 im resezierten Präparat optimieren die Dichtheit der Klammernähte, garantieren eine stabile Resektionslinie, gewährleisten eine sichere Versiegelung und minimieren das Risiko von Leckagen.

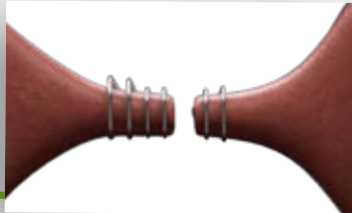

B-Duo Premium Design

Sichere, verstärkte Klammerstruktur für ein ideales Gleichgewicht zwischen Hämostase und Gewebepfusion und damit verbunden, optimale chirurgische Ergebnisse.



4x2 Klammernahttechnik System

Ist für höchste Präzision und Sicherheit in der laparoskopischen bariatrischen Schlauchmagen- und Lungenvolumenresektion entwickelt worden.



EnDrive Zero™

Bestellinformationen - Powered Stapler mit 4x2 Klammernahttechnik

| Produktcode | Produktbezeichnung | VE | VE/Box |
|-------------|--------------------------------------|----|--------|
| PDCE46 | Schaftlänge 280 mm für 46 mm Reloads | 1 | 3 |
| PDSE46 | Schaftlänge 340 mm für 46 mm Reloads | 1 | 3 |
| PDLE46 | Schaftlänge 440 mm für 46 mm Reloads | 1 | 3 |
| PDCE60 | Schaftlänge 280 mm für 60 mm Reloads | 1 | 3 |
| PDSE60 | Schaftlänge 340 mm für 60 mm Reloads | 1 | 3 |
| PDLE60 | Schaftlänge 440 mm für 60 mm Reloads | 1 | 3 |

Bestellinformationen - Nachladeeinheiten

| Produktcode | Produktbezeichnung | Klammer offen | Klammer geschlossen | Farbe | Länge | Klammeranzahl | VE | VE/Box |
|-------------|-------------------------------|---------------|---------------------|--------|-------|---------------|----|--------|
| PDCR46W | Reload thin tissue / vascular | 2,6 mm | 0,8-0,8-0,8-0,8 | White | 46 mm | 69 | 1 | 12 |
| PDCR46B | Reload normal tissue | 3,6 mm | 1,5-1,5-1,8-1,8 | Blue | 46 mm | 69 | 1 | 12 |
| PDCR46Y | Reload normal / thick tissue | 3,8 mm | 1,8-1,8-2,1-2,1 | Yellow | 46 mm | 69 | 1 | 12 |
| PDCR46G | Reload normal / thick tissue | 4,1 mm | 2,0-2,0-2,3-2,3 | Green | 46 mm | 69 | 1 | 12 |
| PDCR46H | Reload extra thick tissue | 4,4 mm | 2,3-2,3-2,6-2,6 | Black | 46 mm | 69 | 1 | 12 |
| PDCR60W | Reload thin tissue / vascular | 2,6 mm | 0,8-0,8-0,8-0,8 | White | 60 mm | 87 | 1 | 12 |
| PDCR60B | Reload normal tissue | 3,6 mm | 1,5-1,5-1,8-1,8 | Blue | 60 mm | 87 | 1 | 12 |
| PDCR60Y | Reload thin tissue / vascular | 3,8 mm | 1,8-1,8-2,1-2,1 | Yellow | 60 mm | 87 | 1 | 12 |
| PDCR60G | Reload normal / thick tissue | 4,1 mm | 2,0-2,0-2,3-2,3 | Green | 60 mm | 87 | 1 | 12 |
| PDCR60H | Reload extra thick tissue | 4,4 mm | 2,3-2,3-2,6-2,6 | Black | 60 mm | 87 | 1 | 12 |